

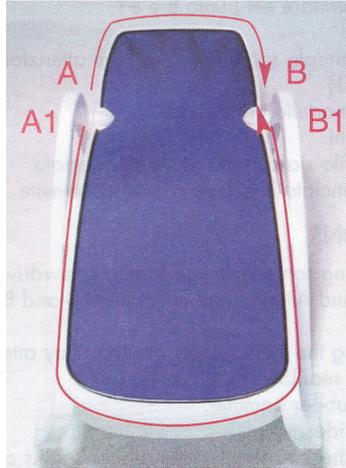
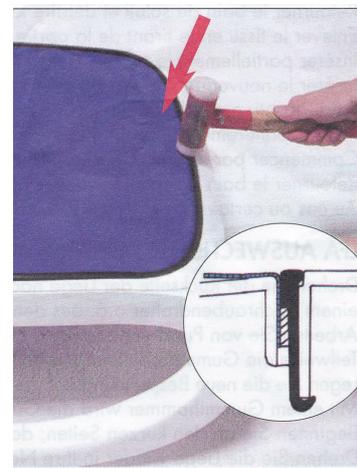


# Anleitung zum Bezugswechsel ALFA

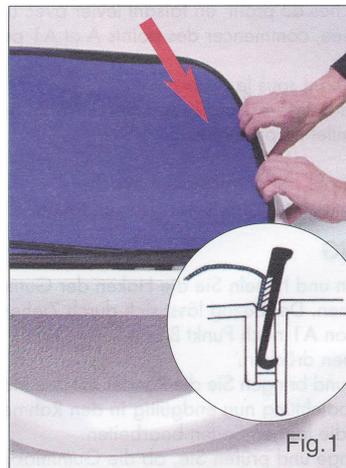


1. Drehen Sie die Rückseite der Liege nach oben und hebeln Sie die Haken der Gummiabdichtung mit einem Schraubendreher o.ä. aus dem Rahmen. Der Bezug lässt sich durch Ziehen in die Gegenrichtung entfernen. Arbeiten Sie von Punkt A nach Punkt B und von A1 nach Punkt B1.

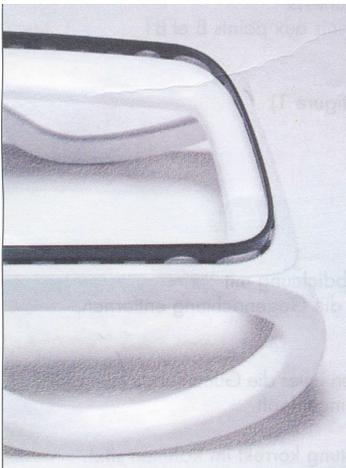

2. Teilweise die Gummiabdichtung in den Rahmen drücken.

3. Legen Sie die neue Bespannung auf die Liege und bringen Sie die Ränder mit den Händen unter die Gummiabdichtung (Fig. 1).

4. Mit einem Gummihammer wird die Gummiabdichtung nun endgültig in den Rahmen eingeklopft.

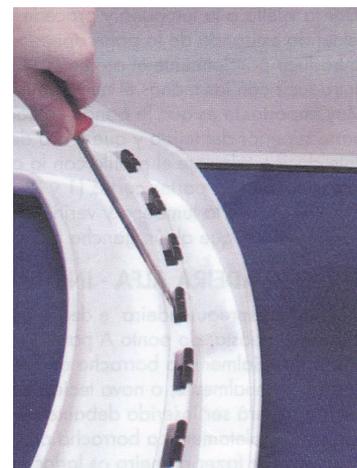

5. Beginnen Sie an den kurzen Seiten; danach die langen Seiten bearbeiten.

6. Drehen Sie die Liege wieder in Ihre Normallage und prüfen Sie, ob die Gummiabdichtung korrekt im Rahmen sitzt.

7. Sollte einer der Haken nicht richtig positioniert sein, so korrigieren Sie dies mit einem Schraubendreher o.ä.